

QROXB2® FotoSan Blue Agent - Brugsanvisning (IFU)

Produktbeskrivelse

QROXB2® FotoSan Blue Agent findes i to viskositeter:

- QROXB2® ENDO FotoSan Blue Agent til anvendelse i rodkanaler.
- QROXB2® PERIO FotoSan Blue Agent til anvendelse i tandkødslommer og på overflader.

Begge produkter indeholder de samme aktive stoffer i samme koncentration. Forskellen er alene viskositeten, hvor PERIO-formuleringen er udviklet som en gel for at lette applicering i tandkødslommer og på overflader.

Brugsanvisning (IFU)

Indhold

- 1 sprøjte med Hydrogenperoxid Liquid (ENDO) eller Gel (PERIO)
- 1 sprøjte med QROXB2 Booster
- 1 Luer-lock connektor
- 1 applikationsspids

Klargøring


1. Fjern hættten fra begge sprøjter.
2. Montér Luer-lock connektor på den ene sprøjte.
3. Sammenkobl de to sprøjter.
4. Overfør indholdet fra den ene sprøjte til den anden ved at trykke stemplet helt i bund.
5. Bland komponenterne ved skiftevis at presse stemplerne frem og tilbage mellem de to sprøjter.
6. For **ENDO** gentag blandingen **10 gange**.
7. For **PERIO** gentag blandingen **15 gange**.
8. Overfør den færdigblandede gel til den sprøjte, der skal anvendes til applikation.
9. Fjern Luer-lock connektoren.
10. Montér applikationsspidsen.

Anvendelse

Produktet er nu klar til brug i henhold til den kliniske behandlingsprotokol for QROXB2® FotoSan Blue Agent.

Bemærk

QROXB2® FotoSan Blue Agent skal anvendes umiddelbart efter opblanding.

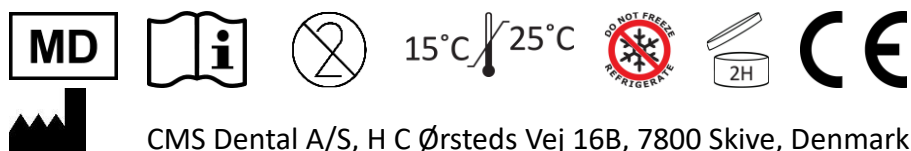

CMS Dental A/S, H C Ørstedes Vej 16B, 7800 Skive, Denmark